

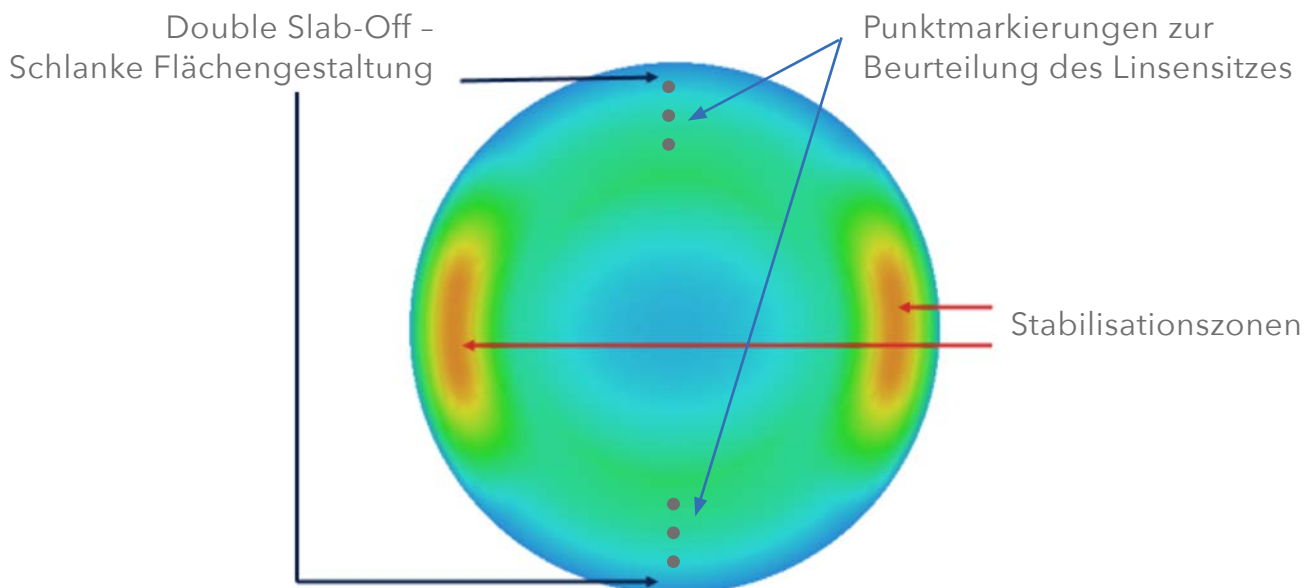
BRING ON THE INNOVATION

NEU



Miru 1month multifocal toric

- Konzentrisches Design
- Center Near Prinzip
- Dynamische Stabilisierung



Mit wenigen Lidschlägen stabilisiert sich die Linse.

Im Gegensatz zur torischen Monatslinse hat die torische Multifokallinse ein symmetrisches Slab-Off, d. h. hier sind die dünneren Bereiche oben und unten gleich groß.

Der Vorteil: egal, wie die Linse aufgesetzt wird, sie stabilisiert nach einigen Lidschlägen von selbst. **Ideal für Presbyope!**

Download
Anpass-Leitfaden.

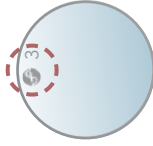
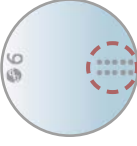

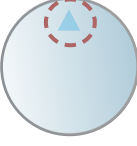
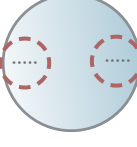


Produktspezifikationen

Miru

1 month Menicon



	Sphärisch	Torisch	Multifokal	Multifokal Torisch	
Eigenschaften	Asmofilcon A				
Wassergehalt	40 %				
Dk/t @-3,00 dpt	161				
Mittendicke	0,08 mm @-3,00 dpt				
Parameter	14,00 mm	14,00 mm	14,20 mm	14,20 mm	
Durchmesser	14,00 mm	14,00 mm	14,20 mm	14,20 mm	
Basiskurve	Standard 8,30 mm/ 8,60 mm	8,60 mm	8,6 mm	8,6 mm	
Sphäre	+6,00 dpt bis -6,00 dpt in 0,25 Abst. -6,50 dpt bis -13,00 dpt in 0,50 Abst. nicht in plan erhältlich	+4,00 dpt bis -6,00 dpt in 0,25 Abst. -6,50 dpt bis -10,00 dpt in 0,50 Abst.	+6,00 dpt bis -6,00 dpt in 0,25 Abst. -6,50 dpt bis -13,00 dpt in 0,50 Abst.	plan bis -6,00 dpt in 0,25 Abst. -6,50 dpt bis -10,00 dpt in 0,50 Abst.	
Zylinder		-0,75, -1,25, -1,75, -2,25* dpt (*nur 10°,20°, 90°, 160°, 170°,180°)		-0,75, -1,25 dpt	
Achse		Rundum 10° Abst.		90° und 180°	
Addition			LOW	LOW	
Linsenmarkierung (von innen lesbar)	 Menicon Logo mit Angabe Basiskurve 3 oder 6	 Logo und Basiskurve bei 12 Uhr und Doppelstrichmarkierung bei 6 Uhr	 Menicon Logo und P	 Blaue Pfeilmarkierung temporal	 Einzelne Punktlinien bei 12 Uhr und 6 Uhr
Handlingstint	blau				
Tragemodus	Tägliches Tragen, monatlicher Austausch				
Packungsgrößen	Anpasslinsen, 3er* und 6er-Packs; *gilt nicht für multifokal torisch				