



MENICON
means
more.

Menicon SOLEKO Pflegemittel Produktübersicht



kontaktlinsen
FREUDE



YALFRESH

Multifunktionslösung mit Hyaluron als natürlichen Benetzer

Zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren, Proteine entfernen, Abspülen und Benetzen weicher Kontaktlinsen, einschließlich farbiger Linsen

Sicheres und komfortables Kontaktlinsentragen



Wirksame
Desinfektion



Effektive
Reinigung



Geeignet für
Silikon-Hydrogel-Linsen



Zum Abspülen von
Kontaktlinsen und/
oder -Behältern

Zusatzplus:

Der YALFRESH Behälter beinhaltet Silberionen für eine zusätzliche Sicherheit gegen mikrobielle Verschmutzung.

Laborstudien bestätigen, silberhaltige Kontaktlinsenbehälter können die Anzahl der Bakterien und die Bildung von Biofilmen verringern.^{1,2}

Inhaltstoffe

Konservierungs-/ Desinfektionsmittel	PHMB 0,00015 %
Chelatbildner/ Reiniger	EDTA
Benetzende/ feuchtigkeitspendende Inhaltsstoffe	HEC (Hydroxyethylcellulose), Hyaluron
Weitere	Phosphatpuffer, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser

1. Soleko data on file 2022
2. Dantam, J. et al. In Vivo Assessment of Antimicrobial Efficacy of Silver-Impregnated Contact Lens Storage Cases, IOVS, March 2012, Vol. 53, No. 3
3. Chang WH et al., Applications of Hyaluronic Acid in Ophthalmology and Contact Lenses. Molecules. 2021 Apr 24;26(9):2485



Für spürbar langanhaltende Feuchtigkeit und mehr Komfort beim Tragen!

Hyaluron: verbessert die Benetzung, stabilisiert den Tränenfilm und sorgt so für angenehmeres, augenschonendes Linsentragen.^{3,4}


HEC: bindet Feuchtigkeit, verbessert die Benetzung und schützt die Augen vor dem Austrocknen.⁵



Hyaluron für spürbar hohen Tragekomfort^{1,2}



HEC für intensive Benetzung³

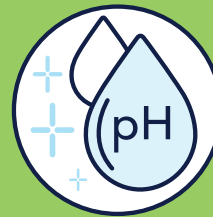

Ausbalancierter pH-Wert

Dank eines pH-Werts ähnlich dem menschlicher Tränen und dem Inhaltsstoff Hyaluron ist **YALFRESH** sanft und angenehm für die Augen.⁶

Spezifikationen

Desinfektions- und Neutralisationszeit	Mindestens 4 Stunden oder über Nacht
Geeignet für	Alle weichen Kontaktlinsen, einschließlich Farblinsen
Verbrauchszeit nach Öffnen der Flasche	60 Tage
Verfügbare Größen	360 ml , 100 ml

4. L. Goa, P. Benfield, Hyaluronic Acid, Drug evaluation, March 1994, Vol. 7, Issue 3, pp 536-566

5. Durand-Cavagna G, Delort P, Duprat P, Bailly Y, Plazonnet B, Gordon LR. Corneal toxicity studies in rabbits and dogs with hydroxyethyl cellulose and benzalkonium chloride. Fundam Appl Toxicol. 1989 Oct;13(3):500-8. PMID: 2612782

6. Abelson M et al. Normal human tear pH by direct measurement. Arch. Ophthalmol. 1981. Feb;99(2):301

PLATINCARE

Einstufiges Peroxidsystem (3 %) mit Platinkatalysator

Zum Reinigen, Desinfizieren, Neutralisieren, Proteine entfernen und Aufbewahren aller Kontaktlinsen, ausgenommen farbiger Linsen

Sicheres und komfortables Kontaktlinsentragen




Gründliche Desinfektion
mit 3 %igem
Wasserstoffperoxid



Effektive
Reinigung

Exzellente mikrobielle Wirkung
PLATINCARE erfüllt die ISO-
Anforderungen für die Wirksamkeit
gegen Bakterien und Pilze.¹

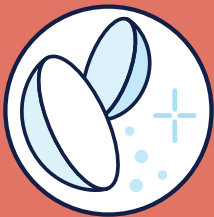

Geeignet für
formstabile Linsen



Ideal für
Silikon-Hydrogel-Linsen


Inhaltstoffe

Desinfektionsmittel	3 % Wasserstoffperoxid
Stabilisierer	EDTA, Phosphonsäure
Neutralisation	Sternförmiger Platin-Neutralisations-Katalysator
Sonstige Bestandteile	Phosphatpuffer, Natriumchlorid, Borsäure, gereinigtes Wasser

1. Soleko data on file
2. www.fda.gov/medical-devices/contact-lenses/hydrogen-peroxide-solution E. Bowling, Why peroxide is still a good choice for lens care, Optometry Times, Sept 2014



PLATINCARE bietet sich perfekt für Kontaktlinsenträger an, die empfindlich auf Konservierungsstoffe in Multifunktionslösungen² reagieren.

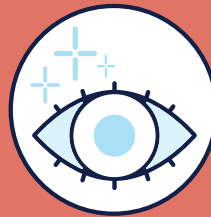

Keine Konservierungsstoffe:
optimal für empfindliche
und trockene Augen



Einstufen-System für
eine einfache Handhabung
ohne Reiben und Abspülen

**Praktischer Behälter mit
platinhaltigen Neutralisationsstern**

Fülllinie
10 ml Füllvolumen

M3-Platinstern
für die Neutralisation



HINWEIS:

Der Sauerstoff entweicht durch das Gewinde des Verschlusses nach außen. Deshalb befindet sich kein O₂-Ventil am Gehäusedeckel.

Der Behälter sollte immer aufrecht, geradestehend aufbewahrt werden!

Spezifikationen

Desinfektions- und Neutralisationszeit	Mindestens 6 Stunden oder über Nacht
Geeignet für	Weiche und formstabile Kontaktlinsen, ausgenommen Farblinsen
Verbrauchszeit nach Öffnen der Flasche	90 Tage
Verfügbare Größen	360 ml , 100 ml (neutrale Version)

SALINE SOLUTION

Kochsalzlösung ohne klassischen Konservierer


Sanfte Abspüllösung für alle Arten von Kontaktlinsen und Linsenbehälter



Vielseitig verwendbar bei optimaler Verträglichkeit



Zum Abspülen von
Kontaktlinsen und/ oder
-Behältern

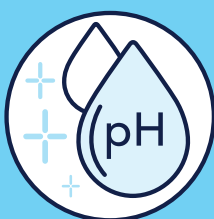

Sterile Lösung mit
gepuffertem pH-Wert

Sanft zu den Augen:

pH-Wert und Salzgehalt ähneln dem natürlichen Tränenfilm und unterstützen auf diese Weise die besonders gute Verträglichkeit.¹

Frei von klassischen Konservierungsstoffen

Natriumchlorit – ein besonders gut verträglicher Inhaltsstoff, wandelt sich beim Kontakt mit dem Auge in natürliche Bestandteile wie Salz, Sauerstoff und Wasser um und bietet so ganz ohne belastende Rückstände eine optimale Augenverträglichkeit.

Inhaltstoffe und Spezifikationen

Konservierungsmittel	Natriumchlorit 0,005 %
Chelatbildner	EDTA
Weitere	Phosphatpuffer, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser
Geeignet für	Alle Arten von Kontaktlinsen und Linsenbehälter
Verbrauchszeit nach Öffnen der Flasche	90 Tage
Verfügbare Größen	360 ml , 100 ml

1. Gorbet MB1, Tanti NC, Jones L, Sheardown H, Corneal epithelial cell biocompatibility to silicone hydrogel and conventional hydrogel contact lens packaging solutions. Molecular Vision 2010; 16:272-282

I-FRESH COMFORT


Augentropfen ohne Konservierungsmittel

Zum täglichen Gebrauch mit und ohne Kontaktlinsen



Optimaler Augenschutz für entspannte Augen


Schutz, Komfort und sanfte Linderung von Symptomen trockener Augen durch hochwertige Inhaltsstoffe wie Hyaluron und Polyvinylalkohol.

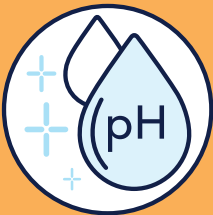

Ausbalancierter pH-Wert



Hyaluron für langanhaltenden Augenschutz und hohen Komfort¹

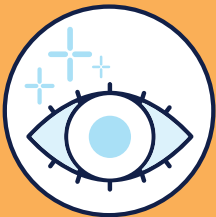

Konservierungsmittelfrei: optimal für empfindliche und trockene Augen

Unterstützt durch das innovative Flaschendesign - Drop-Control-Flasche (NO-JET™-Technologie und Advanced Flow Control™)²:

- Abgabe von einzelnen Tropfen, selbst bei starkem Druck - konsistente Dosierung, kein Auslaufen
- Steril nach dem Öffnen durch ventilfreies System, welches das Eindringen von Verunreinigungen verhindert.

Inhaltstoffe und Spezifikationen

Konservierungsmittel	Konservierungsmittelfrei
Benetzende/ feuchtigkeitspendende Inhaltsstoffe	Hyaluron 0,15 %, Polyvinylalkohol 0,05 %
Weitere	Extrakte aus Aloe, Hamamelis, Kornblume, Kamille und Augentrost; Phosphatpuffer, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser
Geeignet für	Weiche und formstabile Linsen ³
Verbrauchszeit nach Öffnen der Flasche	90 Tage
Verfügbare Größen	10 ml Drop-Control-Flasche

1. WH Chang et al. Application of Hyaluronic Acid in Ophthalmology and Contact Lenses, Molecules 2021 May; 26 (9), 2485
2. Data on file Silgan Dispensing
3. Soleko data on file

HANDHABUNG

1. Vor der Handhabung:

Hände sorgfältig waschen und mit einem sauberen, fusselfreien Handtuch trocknen.



YALFRESH Multifunktionslösung



2. Linsen in die Handfläche legen und mit **YALFRESH** vorsichtig in kreisenden Bewegungen 15-20 Sekunden lang reiben.



3. Die Linse gründlich mit **YALFRESH** abspülen.



4. Linsen in den Behälter geben und bis zur Fülllinie mit frischer Lösung auffüllen.




5. Die Linsen für **mindestens 4 Stunden oder über Nacht** in der Lösung aufbewahren.



6. Nach dem Aufsetzen der Linsen, Behälter leeren, mit **YALFRESH** ausspülen, Behälter inkl. Verschlusskappen an der Luft trocknen lassen.

PLATINCARE Peroxidsystem

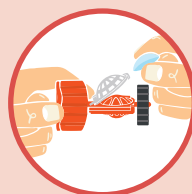


2. Kontaktlinsen in das entsprechende Körbchen (R/L) legen, verschließen und danach nochmals abspülen.



3. Behälter bis zur Fülllinie mit **PLATINCARE** auffüllen – nicht überfüllen. Linsenhalterung einsetzen und verschließen.



4. Die **PLATINCARE** Flasche verschließen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

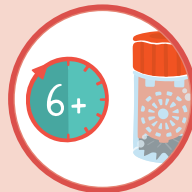

5. Für eine vollständige Desinfektion und Neutralisation, Linsen **mindestens 6 Stunden oder über Nacht** einweichen. Erst danach wieder tragen.



6. Immer die restliche Lösung aus dem Behälter entsorgen, Behälter ausspülen und offen an der Luft trocknen lassen.

TIPP: Bei besonders empfindlichen Augen, Linsen vor dem Aufsetzen mit **SALINE SOLUTION** abspülen.